



双眼ルーペ Eye Mag シリーズ
Seeing is believing



Seeing beyond

EyeMag Medical Loupes

Precision at first sight

術野の拡大観察 — それはこれまで見落としていた所見を発見する可能性を高めます

適切な倍率と作業距離を選択することで目の疲労などを低減し、人間工学的に優れた快適な環境で作業することが可能となります。

手術顕微鏡をはじめとする光学機器のパイオニアであるカールツァイスでは、長年にわたる光学技術のノウハウを集約した双眼ルーペを提案します。

EyeMagシリーズは信頼性が高く、品質の良いレンズを使用しているため、明るくかつ解像力の高い視野を提供します。



EyeMag Smart

More than meets the eye

- すべて2.5倍のルーペ
- 広い視野をご希望の方に
- 初めてルーペをお使いになる方に最適
- ガリレオ式



EyeMag PRO (F)・EyeMag PRO (S)

Professional optics for higher visualization standards

- プロフェッショナルユーズのルーペ
- 3.5倍から5倍の光学系
- チタン眼鏡フレーム (F) とヘッドバンド (S)
- ケプラー式



Measure your working distance

倍率、視野、疲労度などからあなたの目から対象物までの作業距離を決定してください。
 目から対象物までの距離は人により異なりますし、倍率が高くなれば視野は狭くなるため、お好みの組み合わせを選択してください。
 視野径は、P5、P7に記載があります。

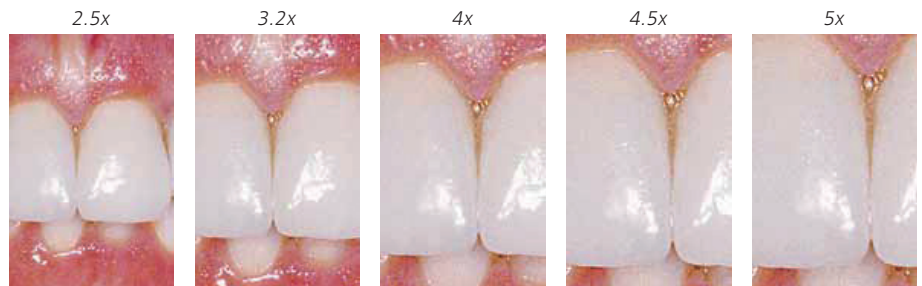


Photo: Klaus Ernst, Stuttgart, Germany

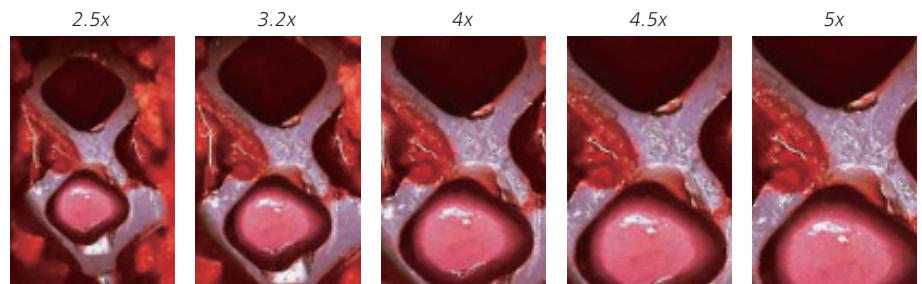


Photo: H.M. Mayer MD PhD, Munich, Germany

EyeMag Smart シリーズ

カールツァイスの光学技術と品質を兼ね備えた
フリップアップルーペです。高い品質の視野および
解像力を体感してください。

2.5倍で広い視野を持ち、作業距離は300mm
から550mmの5つから選択が可能なので、
初めてルーペをご使用になる方におすすめです。

EyeMag Smartの特長

- 倍率2.5倍
- 300mmから550mmの5つから選択
- チタンフレーム採用で軽量化
- ガリレオ式
- エレガントなデザイン



双眼ルーペ EyeMag Smart	
眼鏡式	
全重量: 94g	寸法: 140(幅)×180(奥行)×50(高さ)mm
スポーツフレーム	
全重量: 102g	寸法: 150(幅)×220(奥行)×50(高さ)mm
製造販売届出番号: 13B1X00119005080	

EyeMag Smart スポーツフレーム

カールツァイスで初めてスポーツタイプのメガネフレームに装着可能になりました。


軽くて現代的なスタイルを提供しております。

矯正レンズの取付はできませんのでご了承ください。





Eye Mag Smart 視野徑 (実寸大)

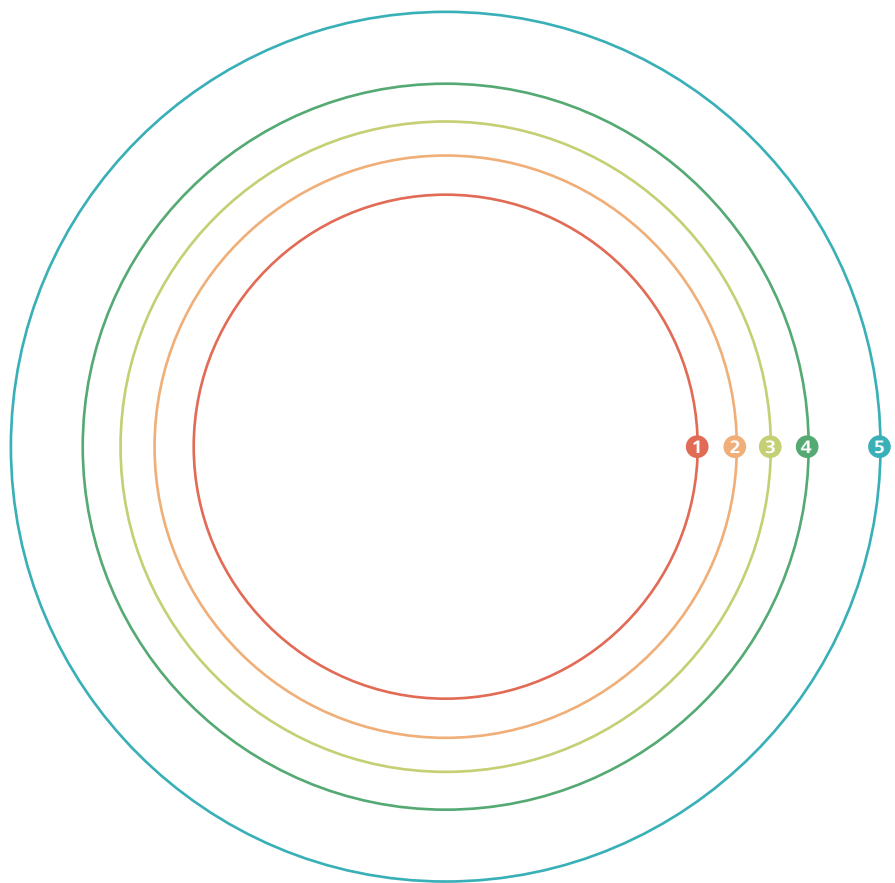

Eye Mag Smart

EyeMag Smart – optical systems

作業距離 (mm)	300	350	400	450	550
作業距離 (inch)	12	14	16	18	22
観察倍率	2.5x	2.5x	2.5x	2.5x	2.5x
視野径 (mm)	67	77	86	96	115
	①	②	③	④	⑤

EyeMag PROシリーズ

EyeMag PROは、より高倍率な視野が必要な方向けのルーペです。ニーズに合わせて3.2～5倍までの倍率と300～500mmまでの作業距離をお選びいただけます。


キャリアシステムもEyeMag PRO F：チタン眼鏡フレームまたは、EyeMag PRO S：ヘッドバンドからお選びいただけます。

心臓部である光学システムは、一切、妥協を許さないカールツァイス双眼ルーペのトップエンドモデルです。



EyeMag PROの特長

- 倍率3.2～5倍
- 作業距離は300mm～500mm
- EyeMag PRO FとEyeMag PRO S、2種類のキャリアシステム
- ケブラー式

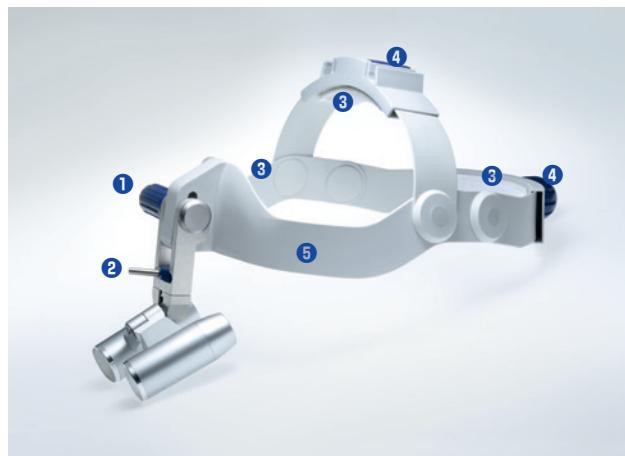

- ①上下方向調整ノブ
- ②ロックングラバー
- ③繊維パッド
- ④ヘッド調整
- ⑤ヘッドバンドシステム

双眼ルーペ EyeMagPRO


重量:(約)90g (付属品を含まない)

全長:57-63mm

製造販売届出番号:13B1X0119005090



EyeMag PRO 視野徑 (実寸大)

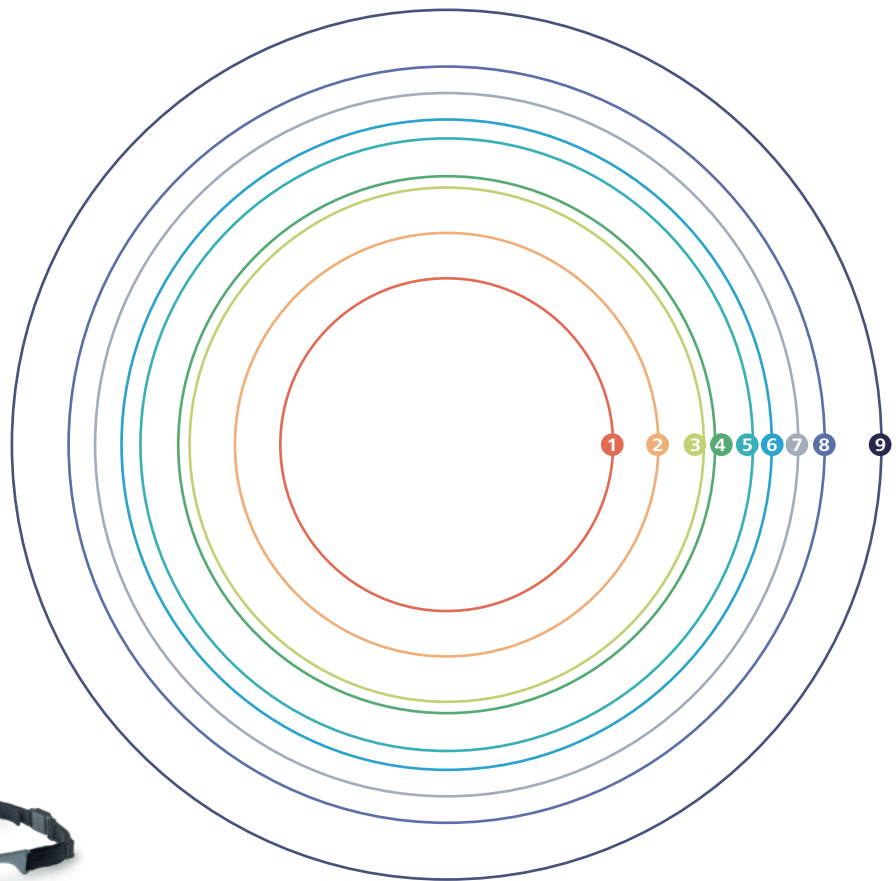

Eye Mag PRO

EyeMag PRO – optical systems

作業距離 (mm)	300		350		400		450		500	
作業距離 (inch)	12		14		16		18		20	
観察倍率	4x	5x	3.6x	4.5x	3.5x	4.3x	3.3x	4x	3.2x	4x
視野径 (mm)	56	44	71	56	86	68	100	81	115	93
	2	1	4	2	6	3	8	5	9	7

LED照明システム

EyeMag Smart およびPROに取り付け可能なEyeMag用照明です。

EyeMag Light II



LED照明システム EyeMag Light II	
光学部	
照度	約 50,000 lux (作業距離 300mm)
色温度	約 5,700 K
照明径	78mm
平均的LED耐用期間	約30,000時間 (最大光束 70%)
電気部	
電圧/電流	7.2V/0.47A
消費電力	最大3.5W
寸法	
LEDヘッドランプ	大きさ:直径 26 x 38mm
	重量:32g (ケーブル含む)
制御ユニット	大きさ:33 x 61 x 106mm
	重量:46g (バッテリーパックを含まない)
バッテリーパック	大きさ:27 x 57 x 83mm
	重量:120g
	リチウムイオンバッテリー 充電時間:約4時間
充電器	大きさ:103 x 47 x 39mm
	重量:115g
製造販売届出番号: 13B1X00119004080	

詳しくは、下記のカールツァイスメディテック(株)各営業所へ お電話もしくはウェブサイトへ、または弊社器械製品取扱店へお問い合わせください。

製造販売元

カールツァイスメディテック株式会社

〒102-0083

東京都千代田区麹町

二丁目10番9号

TEL:0570-021311

FAX:03-5214-1251

<http://www.zeiss.co.jp/med>

大阪営業所 〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-35-22

Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477

名古屋営業所 〒465-0043名古屋市名東区宝が丘25

Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062福岡市中央区荒戸2-1-5

Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014仙台市青葉区本町1-12-7

Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626

- 本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。
- 本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

医科向け